



89€*

je Planung/
vollnavigierte Schablone

*unabhängig von der
Implantatanzahl, zzgl. MwSt.



BEGO Guide

Einfach und schnell zur vollnavigierten Bohrschablone

NAVIGIERTE CHIRURGIE – EINFACH UND SCHNELL

BEGO Guide Bohrschablonen sind die optimale Ergänzung zum BEGO Semados® Implantatsystem.


Maximale Flexibilität – geringe Kosten

- Pilotbohrung oder vollnavigiert
- Zahn- oder schleimhautgetragen
- Optional transgingivale, minimal invasive OP möglich
- Auf Wunsch inklusive digitalem Wax-Up*
- Planung und Fertigung eines Provisoriums auf Basis der Implantatplanung möglich*

Keine eigene Planungssoftware erforderlich

Im BEGO Guide Orderportal beauftragen Sie Ihre Planungsvorschläge – wir planen für Sie!


* optionaler, kostenpflichtiger Scan- und Designservice (Zusatzleistung)

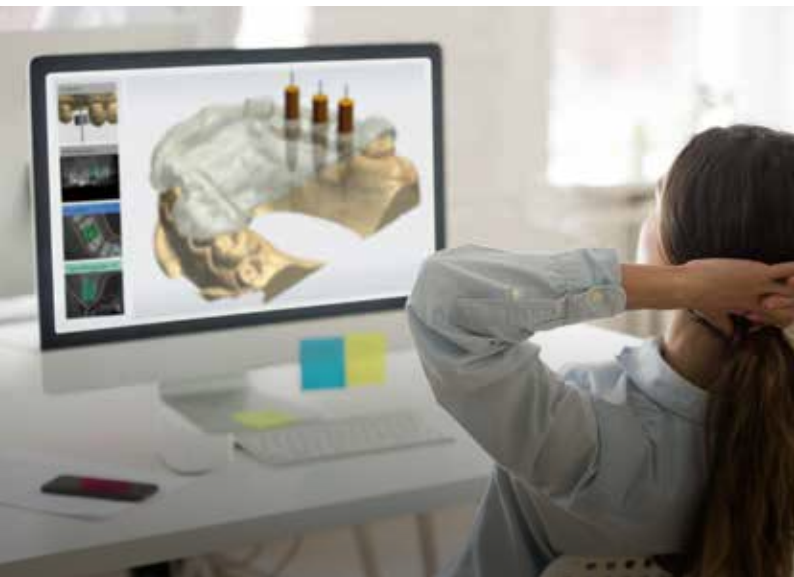

BEGO GUIDE PLANUNGSZENTRUM



Besuchen Sie guide.bego.com

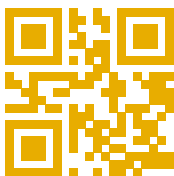

Die Registrierung im BEGO Guide Orderportal ist selbstverständlich kostenlos.

Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen unsere Kollegen vom Team Navigierte Chirurgie unter: **+49 421 2028-230**



IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Implantatsysteme aller Hersteller planbar

Planungsvorschläge für BEGO Semados® Implantate und Implantatsysteme anderer Hersteller möglich.

Pilotschablone

- Für die Pilotbohrung
- Mit jedem Implantatsystem kompatibel
- Hülsen mit Durchmesser 2 mm

Vollnavigierte Bohrschablone

- Für die vollnavigierte Insertion von BEGO Semados® S/SC/SCX/RS/RXS-Implantaten
- Mit BEGO Guide Masterhülsen ausgestattet
- Geführtes Bohren aller Bohrschritte
- Definierter Tiefenanschlag

GOLDwert.

BEGO Security Plus für noch mehr Sicherheit

5-Jahres-Garantie für Versorgungen mit BEGO Semados® Implantaten und deren prothetischen Komponenten.

- Auswählbar im Bestellprozess über das BEGO Guide Orderportal



GOLDwert.

ABLAUF

In drei Schritten zur BEGO Guide Bohrschablone:

1

Registrierung im BEGO Guide Orderportal

Unter guide.bego.com registrieren Sie sich und erhalten Ihre persönlichen Zugangsdaten.

2

Anlegen des Patientenfalls und Upload der CT-/DVT-Daten

- Fallanlage und Angabe der individuellen Planungswünsche
- Hochladen der CT-/DVT-Daten über das Portal oder Zuschicken der Daten-CD
- Versand der Modelle über Abholservice
- Erstellung Ihres individuellen Planungsvorschlages

3

Begutachten und Freigeben der Planung

- Planungsvorschlag steht zur Ansicht und Begutachtung bereit
- Onlinesitzung bei Änderungswünschen möglich
- Freigabe der Planung im Portal
- Produktion der Schablone in Bremen
- Zustellung der Bohrschablone innerhalb weniger Tage



EINFACH. SICHER. IMPLANTIEREN.

www.bego.com

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen · Germany

Tel. : +49 421 2028-230 · Fax : +49 421 2028-265

guide@bego.com · guide.bego.com

Immer alle BEGO News im Blick haben?

Hier direkt zum Newsletter anmelden: www.bego.com/newsletter

